

Kratki proceduralni priručnik za osoblje IZVAN JIT

Nega i uzimanje uzoraka iz arterijskog katetera

KADA OBAVLJATI?

1. U svakoj smeni kontrolisati da li je art. kateter fiksiran; promenite oblogu ako je zaprljana / labava
2. **UVEK:** arterijski kateter je jasno obeležen (npr. etiketom, crvenim čepom) kako bi se sprečilo nehotično davanje lekova
3. Nuliranje i niveliranje transdusera, provera kese za pritisak: repozicioniranje / akutne promene krvnog pritiska, sigurnosna promena

KAKO OBAVLJATI?


1. PRAVILA za negu arterijskog katetera

NIKADA ništa ne ubrizgavati u arterijski kateter

Pobrinite se da su spojevi čvrsti (postoji rizik od vazdušne embolije / krvarenja), pazite na kateter prilikom pomeranja.

Osigurati da je manžetna za NIBP naduvana na 300 mmHg

Proverite distalnu cirkulaciju svaka 2-4 sata

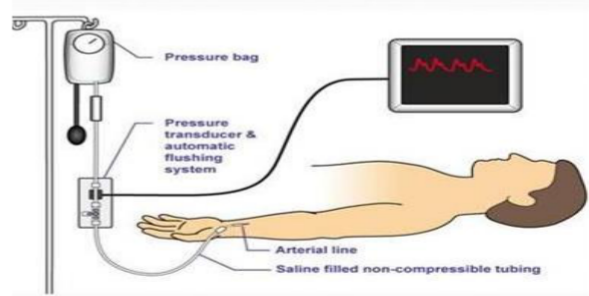


2. Oblici krivulja

Preslaba ili prejaka naduvanost manžetne može dovesti do netačnosti u krvnom pritisku

Promene u obliku krivulje / krvnom pritisku
promene položaja ruke / katetera, proveriti nivo (transdjusera) u odnosu na flebostatsku os, nula

Obavestiti sestru iz JIT-a ako se problem ne reši

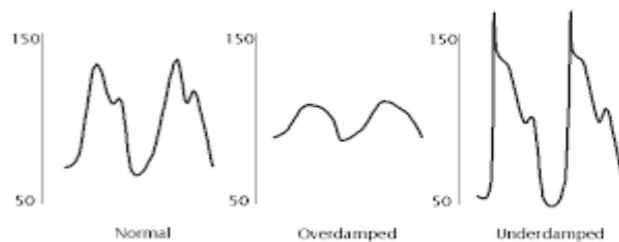

3. Niveliranje i nuliranje

Tihi alarm


Okrenite trokraku slavinicu u položaj OFF (isključeno) u smeru pacijenta i OPEN (otvoreno) u smeru AIR (vazduh)

Uklonite čep, pritisnite nulu, monitor će pokazati kad je postupak dovršen

Vratite trokraku slavinicu u položaj OPEN (otvoreno) u smeru transdjusera) i OPEN (otvoreno) u smeru pacijenta

Vratite čep

• Phlebostatic Axis

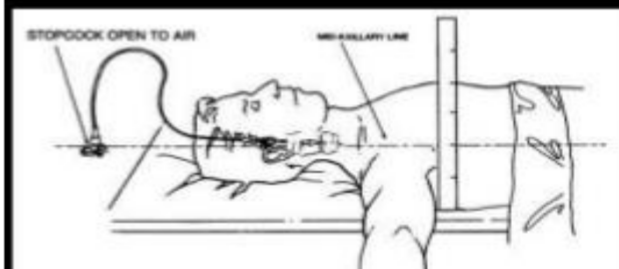

4. Uzimanje krvi

Uzima se pod nadzorom sestree iz JIT-a dok se ne proceni da se može uzimati samostalno

KLJUČNI SIGURNOSNI PROBLEMI / KADA POZVATI POMOĆ

1. Ako se arterijski kateter pomakne / dođe do krvarenja **HITNO POZVATI POMOĆ** i izvršiti pritisak
2. Slab trag oblika krivulje / ravna linija koja se ne može rešiti uz pomoć uputstva
3. Loša perfuzija / nema pulsa u ruci u koju je plasiran arterijski kateter
4. Uvek držite uključene arterijske alarme i mesto uvođenja vidljivim ako je moguće