

Kratki proceduralni priručnik za osoblje IZVAN JIT


Sigurna podešavanja alarma na odeljenjima intenzivne nege

KADA OBAVLJATI?

1. Na početku smene, kod preuzimanja novog pacijenta i po potrebi

KAKO OBAVLJATI?

- Alarmi su uvek **AKTIVNI** i **NIKAD** isključeni
- Alarmi moraju biti podešeni tako da budu jasno čujni

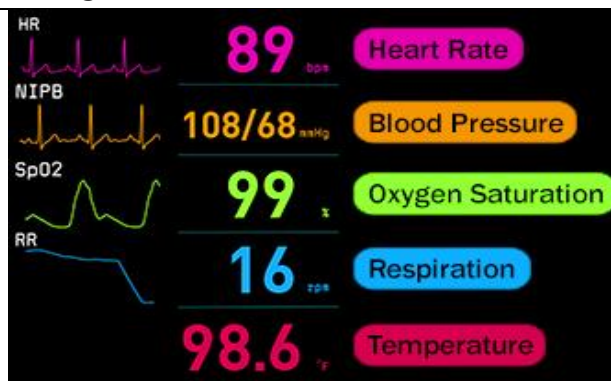

- Sigurne parametre alarma katkad treba prilagoditi individualnim pacijentima
- Podesite visoke i niske parametre

Ovde navodimo primere podešavanja alarma

- Imajte na umu da je ovo **vodič**; individualne varijacije **MORAJU SE** dogovoriti sa sestrom iz JIT

Tip alarma	Visoki alarm	Niski alarm
Sistolni krvni pritisak	160 mmHg	90 mmHg
Puls	120 otkucaja u minuti	50 otkucaja u minuti
SpO2	-	92%
Srednji arterijski pritisak	100 mmHg	65 mmHg
Frekvencija disanja	30 udisaja	8 udisaja

NIKADA nemojte rutinski utišavati ili ignorisati alarme

- Alarmi upozoravaju osoblje na promene pacijentovog stanja koje zahtevaju pažnju. Alarm se može utišati samo za vreme procene pacijenta radi utvrđivanja uzroka alarma

KLJUČNI SIGURNOSNI PROBLEMI / KADA POZVATI POMOĆ

1. **NIKADA** ne utišavajte alarm, osim ako znate šta znači i u stanju ste adekvatno reagovati
2. Proverite aktivnost i jasnu čujnost alarma, i to ne samo na početku smene, već i prilikom preuzimanja novog pacijenta
3. Pozovite pomoć ako se oglasi alarm na koji ne znate reagovati
4. Raspravite individualne parametre s odgovornom medicinskom sestrom
5. Uvek koristite opciju 'utišaj' ('silence'), a ne opciju 'pauza' ('pause') kad reagujete na alarm koji nije hitan